

Pour une hygiène sans défaut



Sani-Tip® sachet de 250 embouts

Et aussi : **Sani-Shield**

Protection pour seringue air-eau :
facile à utiliser, efficace, courte.

sachet de 250 gaines [22,5 x 0 3,5 cm]



Sani-Tip® embouts Standard 76 mm

taille réelle



Sani-Tip® embouts Mini 57 mm

taille réelle



Nous équipons ces seringues :

Adec



122220NS1

Faro SR903 et SR906



122263NS1

Kavo



122275NS1

Luzzani Minimate



122326NS1

Luzzani Minilight



122325NS1

Press Ring



122280NS1

Siemens Sprayvit 4000



122250NS1

Siemens Sprayvit L



122251NS1


...Et beaucoup d'autres

DENTSPLY

PRESENTE

Sani-Tip

embouts à usage unique
pour seringue air-eau

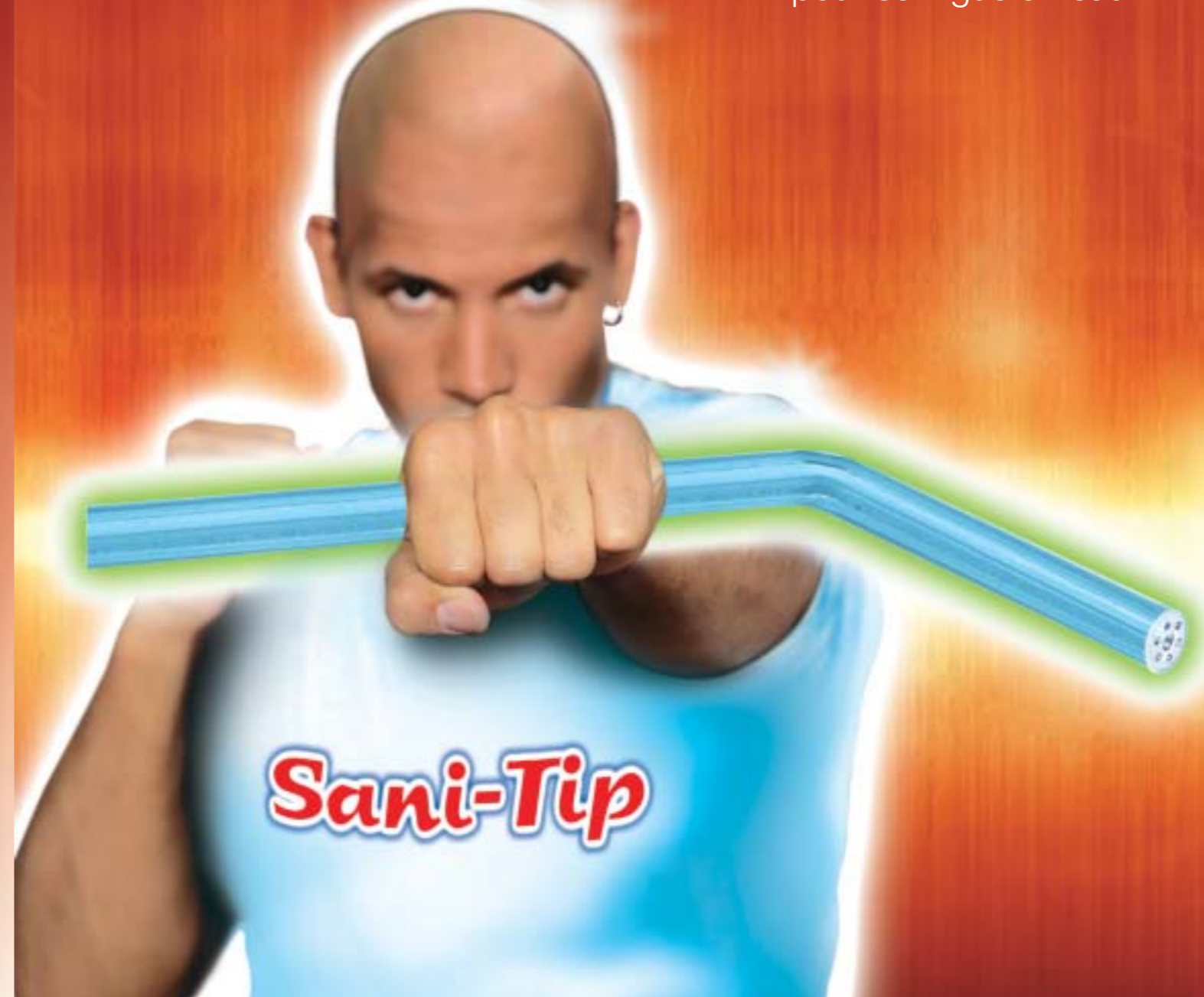

Votre arme contre les contaminations croisées

La seringue air-eau : un risque majeur de contaminations croisées

Sani-Tip® : embouts à usage unique pour seringue air-eau

Entre 2 patients, vous changez de gants,
d'aiguilles, d'instruments...

...et votre seringue air-eau ?

1 En bouche, votre seringue se contamine

"A l'extérieur comme à l'intérieur"

- Contact avec le sang et la salive
- Phénomène d'aspiration lorsque la pression cesse
- Capillarité importante des fluides dans les conduits les plus fins

2 Le nettoyage interne est irréalisable

"Les conduits très fins rendent le nettoyage illusoire"

- Le démontage est impossible
- La contamination et la corrosion interne sont inévitables

Une étude conduite sur des embouts de seringues ré-utilisables montre l'oxydation et la corrosion interne, ainsi qu'une accumulation importante du biofilm dans l'embout ré-utilisable.

(The air/water syringe "P. Barton BDS FDSRCS and M.V. Martin BDS BA PhD FRC Path - Department of Clinical Dental Sciences - University of Liverpool")



neuf 2 mois 6 mois 1 an

3 La stérilisation est impossible

"On ne stérilise que ce qui est propre !"

- C'est une règle absolue en matière de stérilisation (AFNOR 1992)


...Changez aussi

l'embout de votre seringue air-eau

➤ Rincez en douceur avec un fin brouillard


Exclusif
Sani-Tip®

Avec son canal central pour l'eau et ses 6 canaux latéraux pour l'air, Sani-Tip® permet une parfaite répartition des fluides. Vous rincez en douceur, sans excès d'eau, pour le confort de vos patients.

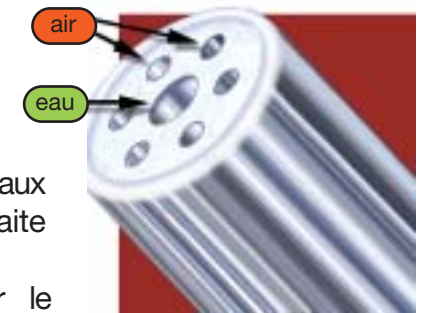

➤ Optimisez vos collages avec un air parfaitement sec

Les conduits d'alimentation air et eau du Sani-Tip® sont séparés sur toute la longueur pour garantir un air parfaitement sec. Sani-Tip® optimise vos collages et préserve le rendu esthétique de vos restaurations.

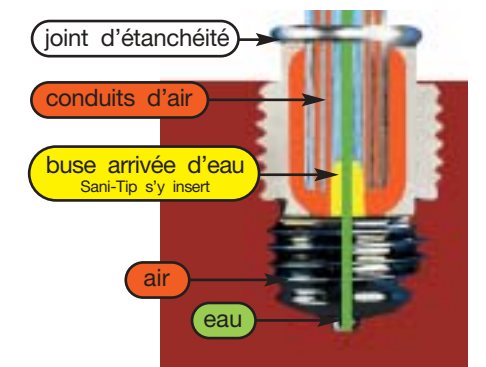

➤ Préservez votre seringue air-eau des problèmes de corrosion

Réalisés en laiton inoxydable, sans aluminium, nos adaptateurs éliminent les risques d'électro-corrosion en présence d'eau. Fuites et démontage difficile sont évités. Votre seringue air-eau est préservée.



➤ Offrez-vous un confort de travail supérieur

Rigide, Sani-Tip® sert d'écarteur sans risquer de blesser la commissure des lèvres grâce à sa surface parfaitement lisse. Orientable à 360°, il vous permet de plus d'accéder facilement à toute la cavité buccale.

